



## Kablosuz tıbbi ayak şalterleri MFS PHACO SW2.4LE-MED Malzeme No.: istek üzerine


### Ürün özellikleri

- steute wireless low energy ile sinyal yollama
- Doldurulabilir Lityum iyon akü ile çalışır
- Akü'yü doldurmak için priz
- Dikey ve yatay pedal, proporsiyonel çıkış sinyalli
- 4 Basma Butonlu Anahtar, her biri 2 anahtarlama işlevli
- Taktile geri bildirim için programlanabilir fren noktaları
- Hassas ve yüksek kesinlikte kullanım

### Notlar

- Resim opsiyonel yedek parçaları gösterir

### Ebatlar

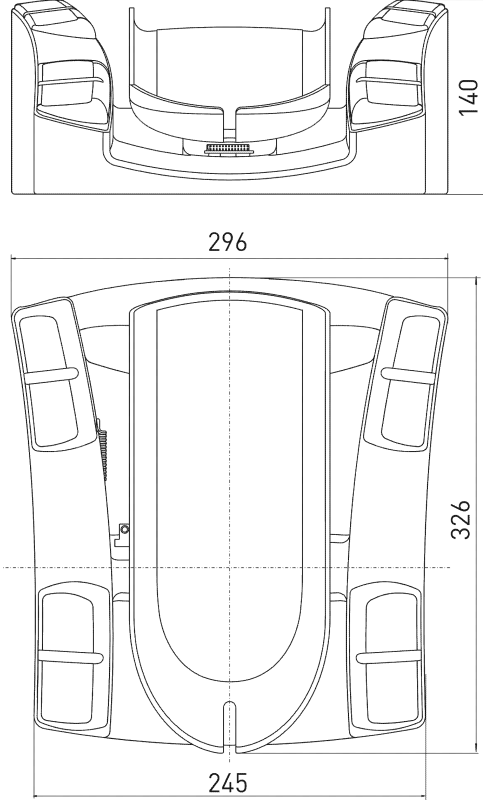

### Genel teknik veriler

#### Uygulamalı normlar

IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 62304, IEC 60529

#### Dış kutu

termoplast, dayanıklı

#### Sallanan Switch

sağlam, ameliyat onaylı silikon

#### Anten

içten antenli

#### Koruma türü

IPX8 (IEC/EN 60529)

#### Şalt sistemi

Sallanan Switch: 8 Şalt fonksiyonu

Pedal: proporsiyonel çıkış sinyalli, yatay: -10°... 0 ... 10° +/- 2°,

dikey: 0 ... 15° +/- 1°

#### Mekanik Ömür

Sallanan Switch: ≥ 250 000 şalt ömrü

Pedal: ≥ 1 000 000 şalt ömrü

#### Uyum

**Avrupa:** CE EN 300 328; EN 62479; EN 301 489-1; EN 62368-1

**ABD:** FCC Title 47 CFR, Part 15

**Kanada:** IC RSS-247, Issue 1

**Japonya:** ARIB STD-T66

Hate ve teknik değişiklikler saklıdır.



## Kablosuz tıbbi ayak şalterleri MFS PHACO SW2.4LE-MED Malzeme No.: istek üzerine

### Kablosuz teknik

<b>Frekans</b> 2,4 - 2,4835 GHz	<b>Giriş hasasiyeti</b> -93 dBm
<b>Kanal Bant Genişliği</b> 2 MHz	<b>HF-Data hızı</b> 1 Mbps
<b>Menzil</b> 10 m (tipik)	<b>Modül süreci</b> GFSK, 40 kanalda adaptif frekans atlaması
<b>Çıkış gücü</b> 3 dBm - 7 dBm	<b>Arayüz - hızı</b> 115.2 kBd (UART)

### Voltaj Beslemesi

<b>Voltaj Beslemesi</b> doldurulabilir lityum-iyon akü	<b>Şarj voltajı</b> 9 VDC - maks. 600 mA
---	---

#### Note

- Since this article is part of a medical product, it can only be validated in combination with the overall system. Proof of conformity to the Medical Device Regulation (MDR 2017/745) can therefore only be handled by the customer marketing the system. At the request of the customer, steute can affix a CE mark with the 4-digit number of the appropriate notified body.